

SIRIUS®

Electrophysiology / Diagnostic Catheters



+++

Steuerbarer Diagnostik-Katheter
Steerable Diagnostic Catheter

 **OSYPKA**
Technology for an active life

SIRIUS®

Steuerbarer Diagnostik-Katheter

Der neue **OSYPKA SIRIUS®** ist ein steuerbarer Diagnostik-Katheter für die elektrophysiologische Diagnostik im Herzen, insbesondere das Koronarsinus-Mapping.

Der **SIRIUS®** Katheterschaft ermöglicht im Zusammenspiel mit dem neuen Griffelement eine optimale Platzierung mit stabilem Wandkontakt dank der idealen Balance von Torsionstreue, Flexibilität und präziser stufenloser Steuerung der Kurve.

Besondere Eigenschaften:

- Kraft zur Manipulation der Katheterspitze individuell einstellbar
- Verbesserte Torsionssteifigkeit und Bogenstabilität
- Neue optimierte Kurvenform für die Platzierung im Koronarsinus
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit und Signalqualität

Technische Daten:

- Durchmesser 6F
- 4- oder 10-polig
- Polabstand 5 mm, 2-5-2 mm, 2 mm und 2-8-2 mm
- 45 mm und 60 mm Kurvendurchmesser
- Nutzbare Länge 110 cm

Steerable Diagnostic Catheter

The new **OSYPKA SIRIUS®** is a steerable diagnostic catheter for electrophysiological intracardial diagnostic procedures, especially coronary sinus mapping.

The **SIRIUS®** catheter shaft together with the new handle design allow optimal placement and stable tissue wall contact due to an ideal balance between torque control, flexibility and smooth deflection of the tip curvature.

Special Features:

- Force for manipulating the catheter tip can be adjusted individually
- Improved torque control and curve stability
- New optimized curve shape for placement in the coronary sinus
- Excellent X-ray visibility and signal quality

Technical Data:


- Diameter 6F
- 4- or 10-polar
- Pole spacing 5 mm, 2-5-2 mm, 2 mm and 2-8-2 mm
- Curve diameter 45 mm and 60 mm
- Usable length 110 cm



Das neue OSYPKA Katheterdesign

gewährleistet hervorragende Produkteigenschaften dank hochwertiger Materialien und präziser Fertigung „Made in Germany“.

The new OSYPKA catheter design guarantees excellent product features thanks to high quality materials and precise manufacturing “Made in Germany”.

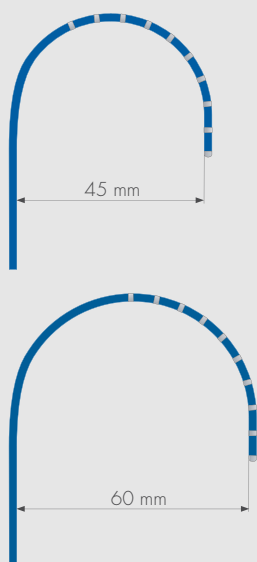

Für eine präzise Platzierung ist die Kraft zur Manipulation der Katheterspitze jetzt individuell am Kathetergriff einstellbar.

To achieve an exact placement, the force for manipulating the catheter tip can now be individually adjusted at the catheter handle.



SIRIUS®

Bestellinformationen / Ordering Information:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of poles	Polabstand Pole spacing	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
28426	SIRIUS®	6 F	4	5 mm	45 mm	110 cm
28427	SIRIUS®	6 F	10	5 mm	45 mm	110 cm
28428	SIRIUS®	6 F	10	2-5-2 mm	45 mm	110 cm
28429	SIRIUS®	6 F	10	2 mm	60 mm	110 cm
28430	SIRIUS®	6 F	10	2-5-2 mm	60 mm	110 cm
28431	SIRIUS®	6 F	10	2-8-2 mm	60 mm	110 cm

Zubehör / Accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Resterilisierbar (Anzahl) Resterilizable (Number)	Polanzahl (Katheter) Number of poles (catheter)	Weiteres benötigtes Zubehör Additional required accessories
53820	D 350	2,00 m	nein / no	10 / 6	Adapter / adaptor 53821 / 53822
53821	350-4	n/a	nein / no	4	Kabel / cable 53820
53822	350-10	n/a	nein / no	10 / 6	Kabel / cable 53820
53825	DX-4/10	2,30 m	Ja (20) / Yes (20)	4	n/a
53827	DX-10/10	2,30 m	Ja (20) / Yes (20)	10 / 6	n/a



Für den Einmalgebrauch bestimmt!
For single use only!



EO-Sterilisiert
EO-sterilized



Gebrauchsanleitung beachten
Consult instructions for use

OSYPKA
Technology for an active life