

CERABLATE®

easy / easy TC

Electrophysiology / RF Ablation Catheters



+++

Steuerbarer Ablationskatheter
Steerable Ablation Catheter

 **OSYPKA**
Technology for an active life

CERABLATE®

easy / easy TC

Steuerbarer HF-Ablations- und Mapping-Katheter mit integriertem Temperatursensor

Der neue **OSYPKA CERABLATE® easy** ist ein steuerbarer Ablationskatheter für die kardiale Hochfrequenzablation von Herzarrhythmien wie z. B.:

- AVNRT (AV-Knoten Re-entry Tachykardien)
- WPW (Wolff-Parkinson-White) Syndrom
- RVOT (Rechtsventrikulärer Ausflusstrakt Tachykardien)

Der **CERABLATE® easy** Katheterschaft ermöglicht im Zusammenspiel mit dem neuen Griffelement eine optimale Platzierung mit stabilem Wandkontakt dank der idealen Balance von Torsionstreue, Flexibilität und präziser stufenloser Steuerung der Kurve.

Besondere Eigenschaften:

- Hervorragende Handhabungseigenschaften
- Präzise, stufenlose Steuerung der Kurveneinstellung
- Präzise Drehkontrolle (Torsionssteifigkeit)
- Optimale Bogenstabilität
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Ausgezeichnetes Temperatursprechverhalten
- Kompatibel mit allen gängigen kardialen Hochfrequenzgeneratoren

Technische Daten:

- Durchmesser 7F
- 4-polig
- Tip-Größe: 4 mm
- Pole im Abstand von 2 mm, 1-4-1 mm oder 2-5-2 mm
- Classic- oder Sigma-Bogenform
- Bogendurchmesser 30, 45 oder 60 mm
- Nutzbare Länge 80 cm oder 110 cm
- Temperatursensor: Thermistor oder Thermocouple

Steerable RF Ablation and Mapping Catheter with integrated Temperature Sensor

The new **OSYPKA CERABLATE® easy** is a steerable ablation catheter for radio frequency ablation of cardiac arrhythmias, such as:

- AVNRT (AV-Node Re-entry Tachycardias)
- WPW (Wolff-Parkinson-White) Syndrome
- RVOT (Right Ventricular Outflow Tract Tachycardias)

The **CERABLATE® easy** catheter shaft combined with the new handle design allow optimal placement and stable tissue wall contact due to an ideal balance between torque control, flexibility, and smooth deflection of the tip curvature.

Special Features:

- Superior handling characteristics
- Precise, smooth movement of the curve setting
- Excellent torque control
- Optimal curve stability
- Very good x-ray visibility
- Excellent temperature response
- Compatible with all commonly available radio frequency generators for cardiac arrhythmia ablation

Technical Data:


- Diameter 7F
- 4-polar
- Tip-size: 4 mm
- Pole spacing 2 mm, 1-4-1 mm or 2-5-2 mm
- Classic or Sigma curve types
- Curve diameter 30, 45 or 60 mm
- Usable length 80 cm or 110 cm
- Temperature sensor: thermistor or thermocouple




Das neue OSYPKA Katheterdesign

gewährleistet hervorragende Produkteigenschaften dank hochwertiger Materialien und präziser Fertigung „Made in Germany“.

The new OSYPKA catheter design guarantees excellent product features thanks to high quality materials and precise manufacturing “Made in Germany”.

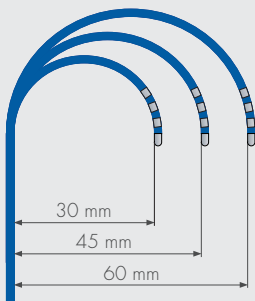

CLASSIC-Bogenform
CLASSIC curve type

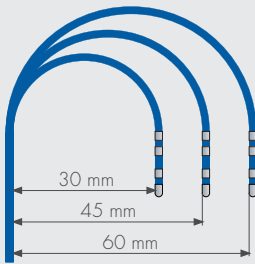

SIGMA-Bogenform
SIGMA curve type



Für eine präzise intrakardiale Platzierung ist die Kraft zur Manipulation der Katheterspitze jetzt individuell am Kathetergriff einstellbar.

To achieve an exact intracardial placement, the force for manipulating the catheter tip can now be individually adjusted at the catheter handle.



CERABLATE®

easy / easy TC

Bestellinformationen / Ordering information:

Varianten mit Thermistor Temperatursensor / variants with thermistor temperature sensor:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of poles	Polabstand Pole spacing	Bogenform Curve shape	TIP-Material TIP-material	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
283083	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
283084	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
283085	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm
283086	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	30 mm	80 cm
283087	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	45 mm	80 cm
283088	CERABLATE® easy	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	60 mm	80 cm
283089	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	30 mm	110 cm
283090	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	45 mm	110 cm
283091	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	60 mm	110 cm
283092	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	30 mm	80 cm
283093	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	45 mm	80 cm
283094	CERABLATE® easy	7F	4	1-4-1 mm	Sigma	Platin	60 mm	80 cm

Passendes Zubehör / Appropriate accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Resterilisierbar (Anzahl) Resterilizable (Number)	Anschließbare Katheter Connectable Catheters	Anschließbarer Generator Connectable generator
81942	D 369	1,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	OSYPKA HAT300 Pin Box
81948	D 369	2,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	OSYPKA HAT300 Pin Box
82513	D369-EPT	0,60 m	Nein / no	CERABLATE® easy	BSc, EPT
82514	D369-CW	1,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	Stockert, EpShuttle
82521	D369-CW	2,00 m	Nein / no	CERABLATE® easy	Stockert, EpShuttle
82523	D369-CW	3,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	Stockert, EpShuttle
82525	D369-IBI	2,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy	SJM, T11 / Ampere

Varianten mit Thermocouple Temperatursensor / variants with thermocouple temperature sensor:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Außen-Ø Outer Ø	Polanzahl No. of poles	Polabstand Pole spacing	Bogenform Curve shape	TIP-Material TIP-material	Kurven-Ø Curve Ø	Nutzbare Länge Usable length
283080	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-5-2 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
283081	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-5-2 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
283082	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-5-2 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm
283095	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	30 mm	110 cm
283096	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	45 mm	110 cm
283097	CERABLATE® easy TC	7F	4	2-2-2 mm	Classic	Platin	60 mm	110 cm

Passendes Zubehör / Appropriate accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name	Länge Length	Resterilisierbar (Anzahl) Resterilizable (Number)	Anschließbare Katheter Connectable Catheters	Anschließbarer Generator Connectable generator
81997	D 389	1,50 m	Nein / no	CERABLATE® easy TC	OSYPKA HAT300 Pin Box
82000	D 389-CW	2,00 m	Nein / no	CERABLATE® easy TC	Stockert, EpShuttle
82001	D 389-IBI	2,00 m	Nein / no	CERABLATE® easy TC	SJM, T11 / Ampere
82002	TX-HAT500	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	OSYPKA, HAT500
82003	TX-IBI	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	SJM, T11 / Ampere
82004	TX-SMARTABLATE	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	Stockert, Smartablate
82005	TX-Qubic/EpShuttle	2,50 m	Ja / yes (10)	CERABLATE® easy TC	Stockert, EpShuttle ; Biotronik, Qubic



Gebrauchsanleitung beachten
Consult instructions for use



EO-Sterilisiert
EO-sterilized